

# Alcohol-Free Surface Disinfectant Wipes




For the surface disinfection of medical devices, including but not limited to, dental chairs, examination lights and patient transport.

Specially formulated for use in the medical and dental environment. Not intended for use on medical and dental instruments.

**BPR** For the disinfection of surfaces.

Use biocides safely and sustainably. This product should be used in accordance with the product label. PT2 Formulation type: AL.

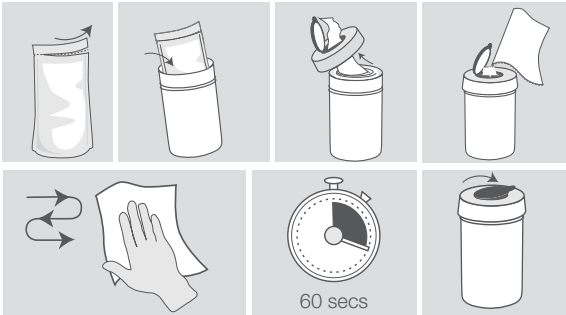

**Directions for use:** 1. Remove cap of dispenser tub, 2. Cut open air tight plastic pouch across the top of the pouch, 3. Feed the centre wipe through the hole in the cap and replace, 4. Pull wipe at a 45° angle. Using sufficient wipes for each application wipe the clean surfaces to be disinfected so that they are completely moistened and let the disinfectant take action over 60 seconds. Allow surface moisture to dry or wipe with clean tissue. Contains detergent. For professional use only.

**Efficacy (60 secs):** Bactericidal. Yeastcidal. Virucidal activity against enveloped viruses: Vaccinia virus, Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), Hepatitis Delta virus, HIV, Influenza virus, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Rubella, Rabies, Measles, Poxviridae.

**Tested to Standards:** EN 16777, EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

**Composition:** Contains Aqua, Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-16)) (68424-85-1) 0.48% w/w (4.8g/kg), Didecylidimethylammonium Chloride (7173-51-5) 0.22% w/w (2.2g/kg), Perfumes.

**Warning.** H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects. **First Aid procedures.**

P301+P310: IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor. UK number for poison advice: 111. Poisons Information Ireland: For information or to report a poisoning incident contact The National Poisons Information Centre (01 8092166). P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **Handling and Storage.** Ensure there is sufficient ventilation of the area. The wearing of protective gloves is recommended. P403+P233: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P235: Keep cool. **Contraindications.** Mild steel, aluminium, copper. **Disposal.** P273: Avoid release to the environment. Dispose of contents/container in accordance with local regulations. Do not discharge liquid into drains or rivers. Do not flush. Non maceratable.

## Efficacy

| Microorganism            | Time          |
|--------------------------|---------------|
| <b>Bactericidal</b>      | <b>60 sec</b> |
| Pseudomonas aeruginosa   | 60 sec        |
| Staphylococcus aureus    | 60 sec        |
| Enterococcus hirae       | 60 sec        |
| <b>Yeasticidal</b>       | <b>60 sec</b> |
| Candida albicans         | 60 sec        |
| <b>Enveloped viruses</b> | <b>60 sec</b> |
| Vaccinia virus           | 60 sec        |
| Hepatitis B virus (HBV)  | 60 sec        |
| Hepatitis C virus (HCV)  | 60 sec        |
| Hepatitis Delta virus    | 60 sec        |
| HIV                      | 60 sec        |
| Influenza virus          | 60 sec        |
| Coronavirus              | 60 sec        |
| Herpesviridae            | 60 sec        |
| Filoviridae (Ebola)      | 60 sec        |
| Rubella virus            | 60 sec        |
| Rabies virus             | 60 sec        |
| Measles virus            | 60 sec        |
| Poxviridae               | 60 sec        |

UFI: 2520-0057-K00H-5Q24

Manufactured in the UK by: Topdental (Products) Ltd, 12 Ryefield Way, Silsden, W. Yorks BD20 0EF England, UK. Tel +44 (0)1535 652 750 www.topdental.co.uk

v1.2 3311

**UK** Warning.  
**BG** ВНИМАНИЕ.  
**CZ** Varování.  
**DE** Achtung.  
**DK** Warnung.  
**EE** Hoiatu.  
**ES** Atención.  
**FI** Varoituis.  
**FR** Attention.  
**GR** Προσοχή.  
**HR** Uprozorenje.  
**HU** Figyelem.  
**IT** Attenzione.  
**LT** Įspėjimas.  
**LV** Brīdinājums.  
**NL** Waarschuwing.  
**NO** Advarsel.  
**PL** Uwaga.  
**PT** Atenção.  
**RO** Atenție.  
**SE** Varning.  
**SI** Pozor.  
**SK** Pozor.



**ES**

Toallitas desinfectantes sin alcohol para superficies

**MD** Para la desinfección de superficies de productos sanitarios como sillones dentales, lámparas de exploración y transporte de pacientes. Formulado especialmente para el uso en un entorno médico y dental. No previsto para el uso en instrumentos médicos o dentales.

**BPR** Para la desinfección de superficies. Usar los biocidas de manera segura y sostenible. Este producto se debe usar de conformidad con la etiqueta del producto.

**Aplicación:** 1. Quite la tapa del bote dispensador; 2. Corte la bolsa de plástico hermética por la parte superior; 3. Introduzca la toallita del centro a través del orificio de la tapa y colóquela de nuevo la tapa. 4. Tire de la toallita en un ángulo de 45°. Utilice suficientes toallitas en cada aplicación para frotar las superficies limpias que haya que desinfectar hasta que estén completamente humedecidas. Deje que el desinfectante actúe durante 60 segundos. Dejar que se evapore el producto o secar con una toallita limpia. Contiene detergente. Solo para uso profesional.

**Espectro de acción (60 segundos):** Bactericida. Yeasticida. Virus con envoltura : Virus de la vacinia, VHB, VHC, HDV, VIH, virus de la Influenza, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Rubéola, Rabia y Sarampión, Poxviridae.

**Sometido a prueba para las normas:** EN 16777, EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

**Composición:** Contiene Agua, cloruro de alquil (C12-16) dimetil benzil amonio (ADBAC/BKC (C12-16)) (68424-85-1) 0.48 % m/m (4.8 g/kg), cloruro de didecildimetilammonio (7173-51-5) 0.22 % m/m (2.2 g/kg), perfumes.

**Atención.** H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **Medidas de primeros auxilios.** P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. (SIT) + 34 91 562 04 20. P305+351+338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. **Manipulación y almacenamiento.** Asegurarse de que existe ventilación mecánica del área. El uso de guantes de protección se recomienda. P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P235: Mantener en lugar fresco. **Contraindicaciones.** Acero dulce, Aluminio, Cobre. **Consideraciones relativas a la eliminación.** Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. No verter en los desagües ni ríos. No tirar al inodoro. No macerable.

**IT**

Salviette disinfettanti senza alcool per superfici

**MD** Per la disinfezione di superfici di dispositivi medici, compresi, a titolo puramente esemplificativo, poltrone di riuniti odontoiatrici, lampade da esame e sistemi per il trasporto dei pazienti. Formulato appositamente per l'uso in ambiente medico e odontoiatrico. Non previsto per l'uso su strumenti medici e odontoiatrici.

**BPR** Per la disinfezione delle superfici. Usare i biocidi in modo sicuro e sostenibile. Questo prodotto deve essere utilizzato in conformità con l'etichetta del prodotto.

**Applicazione:** 1. Togliere il coperchio del barattolo dispenser, 2. Aprire la busta ermetica tagliando l'estremità superiore, 3. Inserire la salvietta centrale nel foro del coperchio e riposizionarlo sul barattolo, 4. Estrarre la salvietta tirando a 45°. Usare un numero sufficiente di salviette per ogni applicazione e strofinare le superfici da disinfettare in modo da inumidire completamente, quindi lasciare agire il disinfettante per 60 secondi. Lasciare asciugare le superfici o pulire con panno pulito. Contiene detergente. Solo per uso professionale.

**Efficacia (60 sec.):** Battericida, Lieviticida. Virus capsulati: Virus del vaccino, HBV, HCV, HDV, HIV, virus dell'influenza, Coronavirus, Filoviridae (Ebola), Rubella virus, virus del morbillo, Herpes virus, Flavivirus, virus della rabbia, Poxviridae.

**Test effettuati secondo le norme:** EN 16777, EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

**Composizione:** Contiene Acqua, alchil (C12-16) dimetil benzil amonio cloruro (ADBAC/BKC (C12-16)) (68424-85-1) 0.48% p/p (4.8 g/kg), didecildimetilammonio cloruro (7173-51-5) 0.22% p/p (2.2 g/kg), profumi.

**Attenzione.** H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Misure di primo soccorso.** P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P305+351+338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **Manipolazione e immagazzinamento.** Assicurarsi che nell'ambiente ci sia ventilazione sufficiente. L'uso di guanti protettivi è raccomandato. P403+P233: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. P235: Conservare in luogo fresco. **Contraindicazioni.** Acciaio dolce, Alluminio, Rame. **Procedure di smaltimento.** Smaltire il contenuto/ contenitore in conformità alle normative locali. P273: Non disperdere nell'ambiente. Non scaricare liquidi nelle fognature o nei fiumi. Non gettare nel WC. Non compostabile. Non macerabile.

**FR**

Lingettes désinfectantes sans alcool pour surfaces

**MD** Pour la désinfection en surface des dispositifs médicaux, notamment des fauteuils dentaires, des lampes d'examen ainsi que pour les moyens de transport des patients. Spécialement formulé pour un usage médical et dentaire. Non destiné à une utilisation sur les instruments médicaux et dentaires.

**BPR** Pour la désinfection de surfaces. Utiliser les biocides avec précaution et de façon durable. Le présent produit doit être utilisé conformément à l'étiquette.

**Mode d'emploi:** 1. Retirer le couvercle de la boîte distributrice, 2. Découper la partie supérieure du sachet en plastique hermétique, 3. Faire passer la lingette qui se trouve au centre à travers l'ouverture dans le couvercle et remettre ce dernier en place, 4. Tirer la lingette à un angle de 45°. Utiliser suffisamment de lingettes pour chaque surface propre à désinfecter de manière à l'humidifier entièrement, puis laisser le désinfectant agir pendant 60 secondes. Laisser l'humidité superficielle s'évaporer ou sécher avec une serviette propre. Contient un détergent. Pour un usage professionnel exclusivement.

**Spectre d'efficacité (60 sec):** Bactéricide, Levuricide. Les virus enveloppés comprennent : Virus de la vacine, VHB, VHC, VHD, VIH, le virus de la grippe, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Rubéole, Rage, Rougeole, Poxviridae.

**Testé aux normes:** EN 16777, EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

**Composition:** Contient de l'eau, chlorure d'alkyl (C12-16) diméthylbenzylammonium (ADBAC/BKC [C12-16]) (68424-85-1) 0,48 % p/p (4,8 g/kg), chlorure de didecylidiméthylammonium (7173-51-5) 0,22 % p/p (2,2 g/kg), parfums.

**Attention.** H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Premiers secours.** P301+P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **Belgium poison centre no.** 070 245 245. **Manipulation et stockage.** Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé. Le port de gants de protection est recommandé. P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P235: Tenir au frais. **Contre-indications.** Acier doux, aluminium. **Cuivre. Procédure d'élimination.** Éliminer le contenu/conteneur conformément aux réglementations locales. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières. Ne pas jeter dans les toilettes. Non macérable.

**DE**

Alkoholfreie oberflächen reinigungs- und desinfektionstücher

**MD** Für die Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten, insbesondere von zahnärztlichen Behandlungsstühlen, Untersuchungsleuchten und Patiententransportvorrichtungen. Speziell für den Einsatz im medizinischen und zahnmedizinischen Bereich entwickelt. Nicht für den Einsatz bei medizinischen und zahnmedizinischen Instrumenten bestimmt.

**BPR** Zur Desinfektion von Oberflächen. Biozidprodukte vorsichtig und nachhaltig verwenden. Dieses Produkt ist gemäß der Produktkennzeichnung zu verwenden.

**Anwendung:** 1. Nehmen Sie den Deckel von der Spenderdose ab; 2. Schneiden Sie den luftdichten Kunststoffbeutel entlang der oberen Kante des Beutels auf; 3. Führen Sie das in der Mitte befindliche Wischtuch durch das Loch im Deckel und setzen Sie ihn wieder auf die Dose; 4. Ziehen Sie das Wischtuch in einem Winkel von 45° heraus. Für jede Anwendung ausreichend Tücher verwenden und die zu desinfizierenden, gereinigten Oberflächen so abwischen, dass sie vollständig befeuchtet sind. Desinfektionsmittel 60 Sekunden einwirken lassen sodass die Oberflächenfeuchtigkeit verdunstet kann. Enthält ein Detergens. Nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

**Wirkungsspektrum (60 Sek.):** Bakteriziden, Levuroziden, Umhüllte Viren: Vaccinavirus, HBV, HCV, HDV, HIV, Influenza-Virus, Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Röteln, Tollwut, Measles, Poxviridae.

**Geprüft gemäß:** EN 16777, EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 13727, EN 13624.

**Zusammensetzung:** Enthält Wasser, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) (68424-85-1) 0,48 Gew.-% (4,8 g/kg) Didecylidimethylammoniumchlorid (7173-51-5) 0,22 Gew.-% (2,2 g/kg), Parfum.

**Achtung.** H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **Erste-Hilfe-Maßnahmen.** P301+P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P305+351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **Handhabung und Lagerung.** Ausreichende Belüftung sicherstellen. Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen. P403+P233: Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P235: Kühl halten. **Contraindikationen.** Baustahl, Aluminium, Kupfer. **Entsorgungsverfahren.** Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer abbleiten. Nicht in der Toilette entsorgen. Nicht auflösbar.







